

# Modulare Mehrfachsteckdose MEDX ZPA









# Modular. Individuell. Einzigartig.

Die Mehrfachsteckdose MEDX ZPA bietet eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre Systeme. Eine Mehrfachsteckdosenleiste, die sich in Auslastung und Platz ideal an die Gegebenheiten anpasst. Die einzigartige Bauweise ermöglicht eine individuelle Anfertigung, ohne dass auf wichtige Features verzichtet wird. Jedes Modul verfügt über einen zusätzlichen Potentialausgleich (ZPA) und je zwei Feinsicherungen. Ihr elektrisches System ist so optimal gegen Störfälle gesichert.

Ein weiteres Plus an Sicherheit bietet der zusätzliche Potentialausgleich (ZPA) am Gehäuse, er ermöglicht die Steckdosenleiste gleichzeitig als lokalen ZPA Verteiler zu nutzten.

### Vorteile:

- VDE Steckdoseneinsätze mit Prüfzeichen
- jeder Steckdoseneinsatz doppelt abgesichert
- 2,5 mm² starke Zuleitungen mit Knickschutz am Gehäuse
- Abzugssicherung gegen unbeabsichtigte Veränderung des elektrischen Systems
- TÜV geprüft für den Einsatz mit Anästhesiegeräten



## Perfektion durch Vielfalt.

Sicher im System. Die e-medic™ Mehrfachsteckdose MEDX ZPA überzeugt durch Vielfältigkeit und lässt sich perfekt an Ihr System anpassen. Im Baukastenprinzip können bis zu 8 Module bestellt werden, die wahlweise zu einer Steckdosenleiste mit fünf oder drei Meter Kabel gefertigt werden. Jedes Modul ist ausgestattet mit einer Abzugssicherung, die eine Veränderung des elektrischen Systems verhindert und nur mit Spezialwerkzeug zu lösen ist.





### Features



Modular – je nach Wunsch mit 1 bis maximal 8 Steckdoseneinsätzen lieferbar. Inklusive Zusätzlicher Potentialausgleich (ZPA) pro Steckdoseneinsatz.



Doppelte Absicherung pro Steckdoseneinsatz, für das unmittelbare Erkennen auftretender Fehler. Im Betrieb austauschbar.



Abzugssicherung gegen eine versehentliche Veränderung des elektrischen Systems.



Zusätzlicher Potentialausgleich (ZPA) am Gehäuse, und 11 mm starkes Stromkabel mit je 2,5 mm² Einzeladern und Knickschutz am Gehäuse.

# Optionen



Schutzschaltermodul Rückstellbarer thermischer Schutzschalter 14 A Art. Nr. 2012264



Schutzschaltermodul Schaltbarer thermischer Drucktasten Schutzschalter 14 A Art. Nr. 2012258



# Technische Daten

#### **MEDX ZPA**


Absicherung Steckdoseneinsatz	je 2 Feinsicherungen 5x 20 mm (DIN EN 60127-2/VDE 0820-2)
ZPA Stecker	nach DIN 42801
Kabellänge	3 m   5 m
Modulanzahl min.	1
Modulanzahl max.	8
Belastung je Steckdose	max. 2000 W
Belastung gesamte Mehrfachsteckdose	max. 3600 W max. 3000 W bei Einsatz von Modulen mit thermischem Schutzschalter
Abmessungen pro Modul (LBH)	90x 78x 60 mm
Gehäuse	Aluminium eloxiert
Standards	IEC 60601-1:2005 + A1:2012 IEC 60601-1:2005 + A1:2012/AMD1:2012 ISO 80601-2-13:2011/AMD1:2005
Lieferumfang pro Modul	1x individuelle Steckdosenleiste*, 1x MEDX Abzugssicherung Grün KIT; 1x Steckschlüssel

<sup>\*</sup>Anfertigung nach Kundenwunsch – nicht eigenständig veränderbar.


Patent angemeldet



### Zubehör

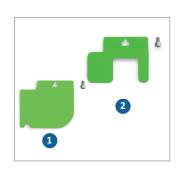



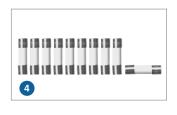







#### Schutzwinkel

Gegen versehentliches Herausziehen oder Hinzufügen von Schuko-Steckern.

1 Abdeckbereich: 1 Steckdose, MEDX Sperrdeckel Grün KIT

Art. Nr. 2011449

Abdeckbereich: 1 Steckdose, MEDX Abzugssicherung Grün KIT
1 Stück je Modul im Lieferumfang der MED X ZPA enthalten.

Montageplatte

Art. Nr. 2011468

Inkl. Bohrungen für Normschienen Halteklauen sowie Schraubklauen. Zubehör: Befestigungsschrauben.

3 Ab 2 Modulen wird eine zweite Montageplatte empfohlen.
Art. Nr. 20115

Set Feinsicherung MEDX/MED5

Art. Nr. 2012267

Set aus 10 Feinsicherungen. Zubehörartikel für die Mehrfachsteckdose MEDX und die Mehrfachsteckdose MED5 ZPA.

4 Auslöse-Charakteristik: träge -T-, Sicherungsaufbau: Keramikrohr mit Löschmittel Rohrbefestigung

Für die flexible und schnelle Befestigung der Mehrfachsteckdose an einem Infusionsständer. Erforderliches Zubehör: Art. Nr. 2011574 (Montageplatte MEDX ZPA).

Rohrbefestigung für 1-3 Module. Ab 4 Modulen wird eine zweite Rohrbefestigung empfohlen.

Art. Nr. 2006327

#### Steckschlüssel

Für das einfache Lösen und Befestigen der Schutzwinkel an der Mehrfachsteckdose MEDX ZPA.

1 Stück im Lieferumfang der MED X ZPA enthalten.

Art. Nr. 2007233

### Normschienen Klammern (2St.)

Zwei Normschienen Klammern für die Befestigung der Mehrfachsteckdose an Normschienen. Erforderliches Zubehör: (Montageplatte MEDX ZPA, Art. Nr. 2011574).

Ab 2 Modulen wird eine zweite Montageplatte empfohlen.

Art. Nr. 2007208