

e-medice™ Visitenwagen AIO

All-In-One


Visitenwagen



Ultraleicht, flexibel, kabellos.

Mit zunehmender Digitalisierung ändert sich auch die Art und Weise, wie die Pflege in einem Gesundheitszentrum erbracht und dokumentiert wird. Leicht zu bedienende und kabellose Technologien rücken dabei immer stärker in den Fokus von Kliniken. Dieser All-In-One Visitenwagen vereint den heutigen Technologiestandard mit besonders guten Hygieneeigenschaften und bietet zusätzlich ausreichende Flexibilität für medizinisch genutzte Bereiche. Ein wertvoller Begleiter, der im Stehen oder Sitzen bedient werden kann. Die Kombination aus Stabilität und ultraleichtem Design, mit leicht zu manövrierenden Rädern, schafft ein System, das mühelos in den Klinikalltag integriert werden kann. Einer Vielzahl von Optionen wie: Medical All-in-One-PC, Tastatur, Maus, Hot-Swap-Akkus für den 24/7 Einsatz und Barcode Scanner ermöglichen die Individualisierung des Systems, perfekt abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse im Patientenzimmer, bei der Visite oder im OP.

**INKL.
HOT-SWAP
AKKU FÜR 24/7
EINSATZ**

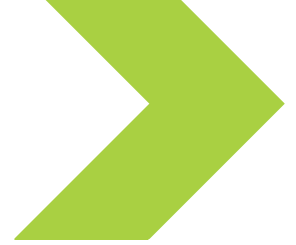


Technische Details

e-medTM Visitenwagen AIO

Beschreibung	e-med TM Visitenwagen inkl. Hot-Swap Akku und VESA Halterung für Panel PC oder Display
max. Gewicht Monitortragarm	5-8 kg
Höheneinstellung	Monitorarm zum Arbeitsfläche: 440x 530 mm Monitorarm zum Boden: 1200x 1570 mm Arbeitsfläche zum Boden: 750x 1050 mm
Hubmechanismus	Manuell mit Gasfeder
Arbeitsfläche	500x 500 mm
Hauptmaterial	Stahl
Räder	4x Schwerlast, 2 davon feststellbar
Transportgriff	Vorn
Kabelmanagement	Ja
Gewicht ohne Zubehör	25,5 kg
VESA Halterung	75 & 100mm neig- und schwenkbar
Akku	Power System: 220V AC Eingang, 12V DC Ausgang Akku Typ: Hot-swap Li-Polymer mit mehrfachem Sicherheitsschutzsystem Lade Zeit: 2-4h für 80% 3-4 Stunden für 100% Laufzeit: ca. 4h bei 40W Beanspruchung
Standards	CE- FCC-B, RoHS, IEC60601-1
Optional	e-med TM AIO 622; Barcode- Scanner, hygienische Tastatur, zusätzlicher Hot-Swap Akku, Ladestation
Art.-Nr.	2012001


ZUBEHÖR

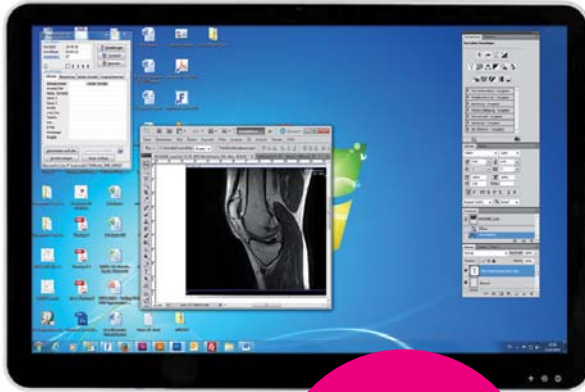

**22" AIO PC
MIT GLAS
FRONT**

e-medic™ AIO 622 Panel PC

Panel	22" mit entspiegelter Glasoberfläche
Prozessor	Intel Core i5/ i7 bis zu 4MB Cache und 3.4 GHz
Festplatte / RAM	120GB SATA SSD / max. 32GB
Kompatibles Betriebssystem (nicht enthalten)	Windows 7, Windows 10 Thin Client kompatibel: Citrix, Microsoft, VMware
Auflösung	1920 x 1080 Full HD
Helligkeit / Kontrast	300 cd/m ² / 1000:1
Schnittstellen I/O	2x USB2.0, 4x USB3.0, 1x Seriell, 2x HDMI, 2x LAN
Schutzklasse	IP65 Front IPX3 Gehäuse
Optional	Touch Funktion- PCAP Multitouch 10 Finger, Webcam 2MP, 2 x LAN Isolierung
Standards	CE, FCC-B, RoHS, DICOM IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, Class 2 double insulation, Energy Star
Art.-Nr.	2012004

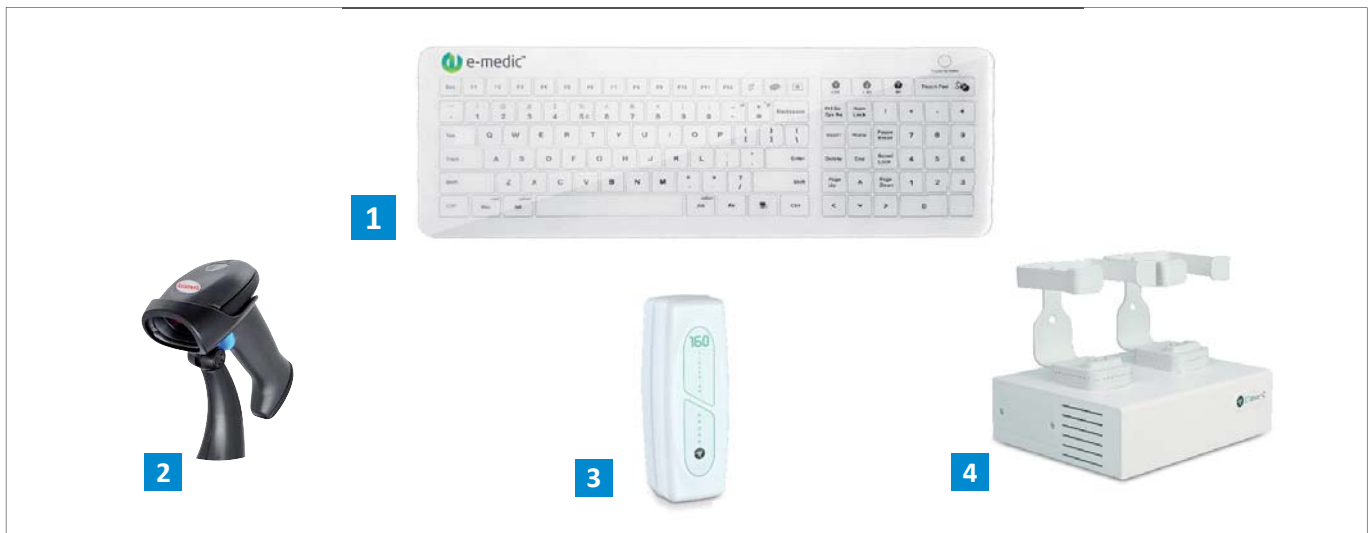

1 e-medic™ Tastatur GL

Wireless > Touchpad > Nummernblock > 6H Glashärte (gehärtet) > Unterstützt Windows, Mac OSX, Android > 0.69 kg

Art.-Nr. 2011997

2 Barcode Scanner

Barcode Scanner mit Ladestation > Für die Datenerfassung direkt am Patientenbett

Art.-Nr. 2012007

3 Hot-Swap Akku

Wechselbarer Akku für den 24/7 Einsatz > 220V AC Eingang, 12V DC Ausgang > Li-Polymer mit mehrfachem Sicherheitsschutzsystem > Ladezeit: 2-4h für 80% | 3-4 Stunden für 100% > Laufzeit: ca. 4h bei 40W Beanspruchung > Statusanzeige des Lebenszyklus per Knopfdruck > Reinigungsbeständig: IP65 > 1Stück im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr. 2011986

4 Ladestation

Ladestation für zwei wechselbare Hot-Swap Akkus > Wandmontage > Zeigt sechs Ladeinformationen an : 1.) leer, 2.) 0-14%, 3.) 15-29%, 4.) 30-59%, 5.) 60-89%, 6.) voll > Ladezeit: 3-4 Stunden für 100%

Art.-Nr. 2011987